



Medical Technologies

Easy-on PC

Espirómetro para PC

Familiarizamos a los pacientes con la atención precisa de las enfermedades pulmonares


El dispositivo para PC de ndd funciona con el software interactivo EasyOne Connect para obtener resultados precisos y fiables al instante.

Gracias a las innovadoras funciones, como la visualización de curvas en tiempo real, incentivos animados e integración con los principales sistemas de registros médicos electrónicos (EMR/EHR) es la mejor opción para realizar pruebas de espirometría con un dispositivo para PC.

Además, la tecnología patentada TrueFlow de ndd elimina la necesidad de calibración sin afectar a la calidad de los resultados.



Sencillo. Seguro. Probado.

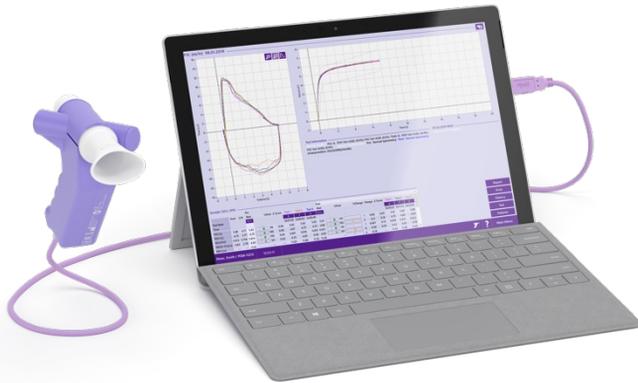

Pantallas de incentivos

Disponibles con el software **EasyOne Connect**.



Especificaciones

Tipos de pruebas: FVC, FVL, SVC, MVV y pruebas pre- y posbroncodilatadoras

Idiomas: alemán, chino, croata, danés, español, finlandés, francés, holandés, inglés, italiano, japonés, noruego, portugués, ruso, sueco, turco y vietnamita

Conectividad con EMR: HL7, XML, GDT, API con EasyOne Connect

Normas: cumple las recomendaciones de ATS/ERS de 2005 y 2019 y las indicaciones de NIOSH/OSHA

Capacidad del disco duro: instalación/sistema 1 GB hasta 4 GB

RAM: 2 GB

Compatibilidad del software EasyOne Connect: Windows 7, Windows 8 y 8.1 (32 y 64 bits), Windows 10 (32 y 64 bits), Windows 11

Números de referencia

2700-3: Easy on-PC spirometer

2050-1: Spirette, caja de 50 unidades

2050-5: Spirette, caja de 200 unidades

2050-10: Spirette, caja de 500 unidades



Medical Technologies

ndd Medical Technologies
300 Brickstone Square, Suite 604 Andover,
MA, 01810 Estados Unidos
Teléfono: +1-978-470-0923

ndd Medizintechnik AG
Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zurich, Suiza
Teléfono: +41 44 512 65 00



Características

- Estímulos animados en tiempo real
- Integración demostrada con los principales sistemas de EMR/EHR
- Tendencias a largo plazo de los resultados de los pacientes
- Mensajes automatizados sobre la calidad de las pruebas e interpretación de los resultados
- Interfaz intuitiva
- Prueba de provocación integrada con protocolos personalizables
- Posibilidad de seleccionar diferentes valores predichos
- Tecnología sin necesidad de calibración

TrueFlow
makes the difference

La medición del flujo por ultrasonidos de n d d es extremadamente precisa en todos los rangos de flujo, independientemente de la composición del gas, la presión, la temperatura y la humedad.

n d d **TrueFlow** es una solución higiénica y sin resistencia que no requiere ningún tipo de calibración durante la vida útil del dispositivo.

EasyOne Connect

El software **EasyOne Connect** ofrece una misma base de datos y una única plataforma para todas las soluciones **EasyOne** en el punto de atención. El tratamiento de los datos nunca había sido tan sencillo.

