



Medical Technologies


EasyOne Pro/LAB

Teste de função pulmonar completo no local de atendimento

Abrindo espaço para o que importa na saúde pulmonar

O EasyOne Pro/LAB revoluciona os testes de função pulmonar com sua ampla gama de testes, design compacto e interface amigável. Suas capacidades, que vão desde espirometria até volumes pulmonares e DLCO, cobrem um amplo espectro de necessidades diagnósticas em saúde respiratória.

O EasyOne Pro/LAB permite que os profissionais de saúde avaliem de forma eficiente e eficaz a função pulmonar, auxiliando no diagnóstico, monitoramento e gerenciamento de condições respiratórias. A combinação de portabilidade, facilidade de uso e precisão torna o EasyOne Pro/LAB adequado para várias configurações clínicas. Concentre-se no que importa na saúde pulmonar com o EasyOne Pro/LAB.

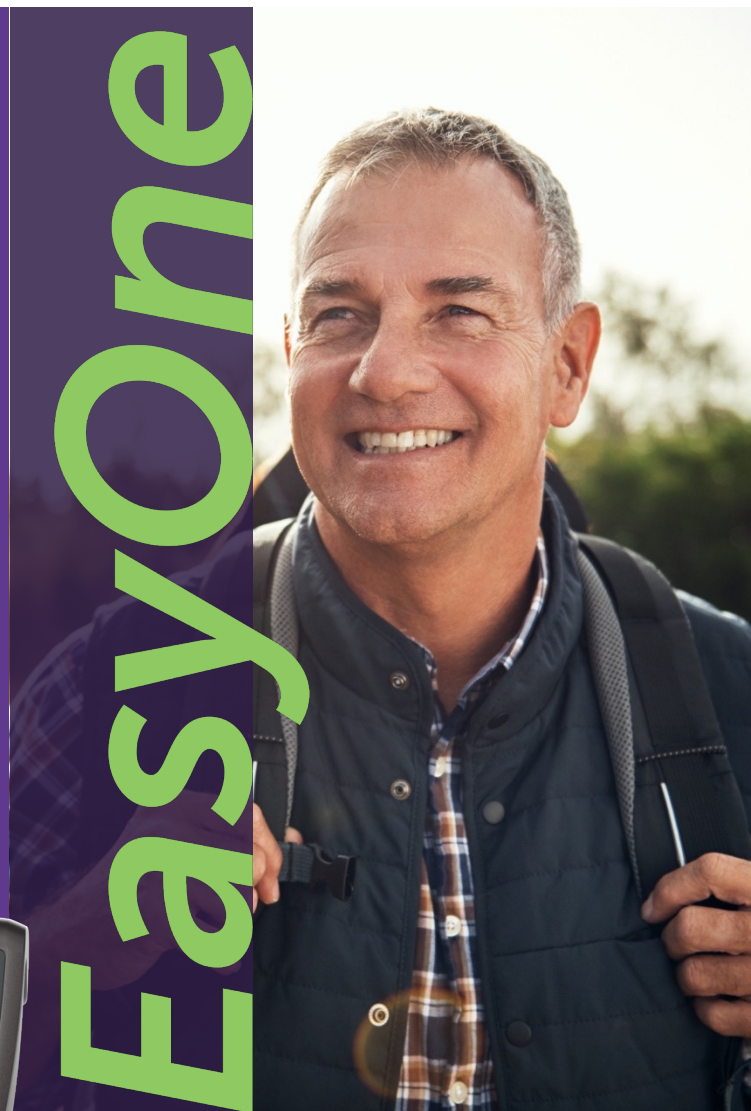

Desempenho preciso



EasyOne Pro

- Espirometria
- DLCO
- Teste de provocação

Volumes pulmonares

- Diluição de hélio de respiração única

EasyOne Pro LAB

- Espirometria
- DLCO
- Teste de provocação

Volumes pulmonares

- Lavagem de nitrogênio multi-respiração



Especificações

EasyOne Pro: FVC, FVL, SVC, MVV, Provocação e Pré/Pós testes, DLCO

EasyOne Pro LAB: FVC, FVL, SVC, MVV, Provocação e Pré/Pós testes, DLCO, MBW, LCI

Idiomas: alemão, chinês, croata, dinamarquês, espanhol, finlandês, francês, holandês, inglês, italiano, japonês, norueguês, português, russo, sueco, turco, vietnamita

Conectividade EMR: HL7, XML, GDT, API com EasyOne Connect

Padrões de espirometria: atende aos padrões ATS/ERS de 2005 e 2019 e NIOSH/OSHA

Padrões DLCO: atende aos padrões 2005 e 2017 DLCO ATS/ERS

Dimensões: 27 x 33.5 x 27 cm (A x L x P), 8 kg

Números de ref^a

3000-1: EasyOne Pro

3100-1: EasyOne Pro LAB

2050-1: Spirettes - Caixa 50 unid.

2050-5: Spirettes - Caixa 200 unid.

2050-10: Spirettes - Caixa 500 unid.
Não disponível em todos os países

3050-1: DLCO Barriettes - Caixa 50 unid.

3050-2: DLCO Barriettes - Caixa 100 unid.

3150-1: FRC Barriettes - Caixa 40 unid.
(para uso somente com o EasyOne Pro LAB)

3150-2: FRC Barriettes - Caixa 80 unid.
(para uso somente com o EasyOne Pro LAB)



Medical Technologies

ndd Medical Technologies
300 Brickstone Square, Suite 604 Andover, MA, 01810 EUA
Telefone: +1-978-470-0923

ndd Medizintechnik AG
Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zurich, Suíça
Telefone: +41 44 512 65 00



Características

- Design portátil e leve sob medida para testes no ponto de atendimento.
- Abordagem centrada no usuário para operação intuitiva, usabilidade instantânea sem tempo de aquecimento.
- Solução higiênica com os consumíveis Spirette e Barriette que eliminam o risco de contaminação cruzada.
- Engenharia de precisão suíça.
- Manutenção mínima, permitindo que mais tempo seja dedicado ao atendimento ao paciente.

TrueFlow
makes the difference

A medição de vazão ultrassônica exclusiva da ndd é altamente precisa em todas as faixas de vazão, independentemente da composição do gás, pressão, temperatura e umidade.

ndd **TrueFlow** é higiênico e livre de resistência solução que não requer calibração durante sua vida útil.

TrueCheck
automated precision

Método patenteado para verificar o desempenho dos equipamentos ndd

- Elimina a necessidade de calibração de gás, bem como a necessidade de um simulador DLCO externo
- Calibração de 5 pontos, incluindo estabilidade e linearidade de gás traçador e sensores de CO

EasyOne Connect

O software **EasyOne Connect** oferece um banco de dados e uma plataforma para todas as soluções de ponto de atendimento EasyOne. O gerenciamento de dados nunca foi tão fácil.

DIGITIZE-ME

