



Medical Technologies



Spirometry 2019

EasyOne Pro/Pro LAB

Análisis de cabecera completo de la función pulmonar

Medición portátil de DLCO, volúmenes pulmonares y espirometría.
Forma muy eficiente y exacta de evaluar la función pulmonar.

n d d m e d . c o m



EasyOne Pro

- Espirometría
- DLCO
- Pruebas de provocación

Volúmenes pulmonares

- Dilución con helio con una sola respiración

Sencillo. Seguro. Probado.

Características


- Guía del usuario automática e información de calidad de la prueba basadas en las normas de 2019 y 2005 de la ATS/ERS
- Puntuación Z, límite inferior de la normalidad y % previsto para interpretación rápida de los resultados
- Curvas e incentivos pediátricos en tiempo real
- Exportación de archivos pdf y datos brutos
- Interfaz HL7 y XML flexible para una integración sencilla con sistemas de historia clínica electrónica
- Solución higiénica con consumibles Spirette y Barriette que elimina el riesgo de contaminación cruzada
- Dispositivo compacto con superficies lisas que permite una limpieza sencilla y meticulosa

EasyOne Pro LAB

- Espirometría
- DLCO
- Pruebas de provocación

Volúmenes pulmonares

- Lavado de nitrógeno multirrespiración

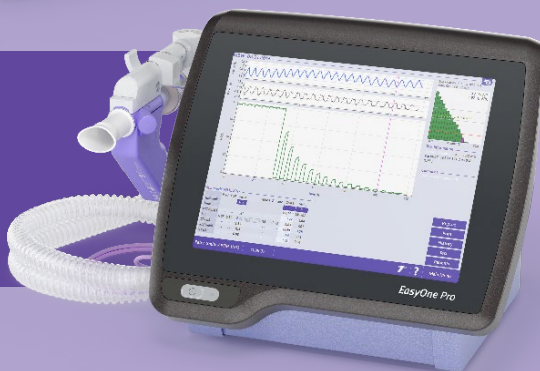

Especificaciones

EasyOne Pro: FVC, FVL, SVC, MVV, pruebas pre-/posbroncodilatación, provocación, DLCO

EasyOne Pro LAB: FVC, FVL, SVC, MVV, pruebas pre-/posbroncodilatación, provocación, DLCO, MBW, LCI

Idiomas: español, alemán, chino, croata, danés, finlandés, francés, holandés, inglés, italiano, japonés, noruego, portugués, ruso, sueco, turco, vietnamita

Conectividad con sistemas de historia clínica electrónica: HL7, XML, GDT, API con EasyOne Connect

Dimensiones: 27 x 33,5 x 27 cm (altura x anchura x profundidad), 8 kg

Números de referencia

3000-1:	EasyOne Pro
3100-1:	EasyOne Pro LAB
2050-1:	Spirette, caja de 50 unidades
2050-5:	Spirette, caja de 200 unidades
2050-10:	Spirette, caja de 500 unidades
3050-1:	DLCO Barriettes, caja de 50 unidades
3050-2:	DLCO Barriettes, caja de 100 unidades
3150-1:	FRC Barriettes, caja de 40 unidades (para uso con EasyOne Pro LAB únicamente)
3150-2:	FRC Barriettes, caja de 80 unidades (para uso con EasyOne Pro LAB únicamente)

TrueFlow

makes the difference

La medición original del flujo ultrasónico tiene gran exactitud en todos los intervalos de flujo, independientemente de la composición del gas, la presión, la temperatura y la humedad.

ndd **TrueFlow** es una solución higiénica y sin resistencia que no requiere calibración durante su vida útil.

EasyOne Connect

El software **EasyOne Connect** ofrece una sola base de datos y una sola plataforma para todas las soluciones de cabecera EasyOne. La gestión de los datos nunca ha sido más sencilla.

TrueCheck

automated precision

TrueCheck se ocupa del control de calidad esencial para las pruebas de análisis de gases. EasyOne Pro es el único dispositivo que ha demostrado ser exacto durante toda su vida útil para la medición de la DLCO.

