



Medical Technologies



Spirometry 2019

Easy on-PC

Spirometro per PC

The **Easy on-PC** è uno spirometro completamente integrato che implementa la nostra tecnologia brevettata TrueFlow per offrire un'accuratezza senza precedenti e risultati affidabili.

nddmed.com




Semplice. Sicuro. Comprovato.

Caratteristiche

- Incentivi animati in tempo reale
- Integrazione EMR comprovata con i principali sistemi EMR/EHR
- Andamento a lungo termine dei risultati dei pazienti
- Feedback della qualità e interpretazione automatici
- Interfaccia software intuitiva
- Test di provocazione bronchiale integrato con protocolli personalizzabili
- Feedback della qualità e interpretazione istantanei
- Ampia gamma di valori attesi selezionabili
- Tecnologia che non necessita di calibrazione

Schermate di incentivazione

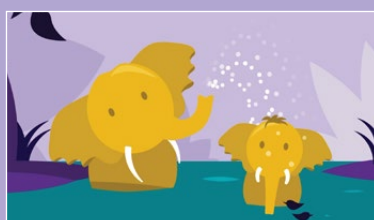

Specifiche

Tipi di test: FVC, FVL, SVC, MVV, Provocazione bronchiale e Pre/Post

Lingue: molte lingue disponibili, come inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, cinese, olandese, vietnamita, turco

Connettività EMR: HL7, XML, GDT, API con EasyOne Connect

Standard: soddisfa gli standard ATS/ERS 2005 e 2019 e NIOSH/OSHA

Capacità disco rigido: installazione/sistema 1 GB. Dati fino a 4 GB

RAM: 2 GB

Sistema operativo: Windows 7, Windows 8 e 8.1 (32 e 64 bit), Windows 10 (32 e 64 Bit), Windows 11

Codici catalogo

2007-3: Spirometro Easy on-PC

2050-1: Spirette scatola da 50 pz.

2050-5: Spirette scatola da 200 pz.

2050-10: Spirette scatola da 500 pz.

TrueFlow
makes the difference

L'originale misurazione a ultrasuoni del flusso è estremamente accurata in tutti i range di flusso, indipendentemente dalla composizione dei gas, dalla pressione, dalla temperatura e dall'umidità.

ndd **TrueFlow** L'originale misurazione a ultrasuoni del flusso è estremamente accurata in tutti i range di flusso, indipendentemente dalla composizione dei gas, dalla pressione, dalla temperatura e dall'umidità.

EasyOne Connect

Il software **EasyOne Connect** offre un database e una piattaforma per tutte le soluzioni POC di **EasyOne**. La gestione dei dati non è mai stata più facile.

