



Medical Technologies



Spirometry 2019

Easy on-PC

Spiromètre de PC

Le modèle **Easy on-PC** est un spiromètre entièrement intégré qui tire avantage de notre technologie TrueFlow brevetée pour des résultats d'une précision et d'une fiabilité inégalées.

nddmed.com




Simple. Sûr. Éprouvé.

Fonctions

- Animations d'encouragement en temps réel
- Intégration démontrée du DEP avec les meilleurs systèmes DEP/DMP
- Tendance à long terme de résultats de patient
- Retour qualité et interprétation automatisés
- Interface logicielle intuitive
- Test de provocation intégré avec protocoles personnalisables
- Retour qualité et interprétation instantanés
- Large gamme de valeurs de prédiction à sélectionner
- Technologie sans étalonnage

Écrans d'encouragement

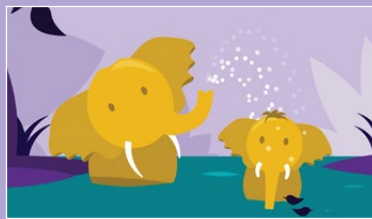

Spécifications

Types de test : CVF, CDV, CVL, VMV, défi et test pré/post

Langues : nombreuses disponibles, dont : allemand, anglais, chinois, espagnol, français, néerlandais, portugais, turc, vietnamien

Connectivité DEP : HL7, XML, GDT, API avec EasyOne Connect

Standards : conforme aux normes ATS/ERS 2005 et 2019 ATS/ERS et NIOSH/OSHA

Mémoire : installation/système 1 Go. Données jusqu'à 4 Go.

RAM: 2 Go

Système d'exploitation : Windows 7, Windows 8 et 8.1 (32 et 64 bits), Windows 10 (32 et 64 bits), Windows 11

Références

2700-3 : spiromètre Easy on-PC

2050-1 : boîte de 50 embouts Spirette

2050-5: boîte de 200 embouts Spirette

2050-10: boîte de 500 embouts Spirette

TrueFlow
makes the difference

La mesure du débit par ultrasons originale est très précise à n'importe quel débit, peu importe la composition des gaz, la pression, la température et le taux d'humidité.

ndd **TrueFlow** est une solution hygiénique et sans résistance qui ne nécessite aucun étalonnage au cours de sa durée de vie.

EasyOne Connect

Le logiciel **EasyOne Connect** offre une base de données et une plate-forme pour toutes les solutions **EasyOne** au chevet du patient. La gestion de données n'a jamais été aussi simple.

À SCANNER

